

AED
自動体外式除細動器

AED-2100仕様変更のご案内



平素より、格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
この度、2009年6月より発売をしております
「自動体外式除細動器 AED-2100 カルジオライフ」の仕様を
2011年3月より、下記の通り変更致しましたので、ご案内致します。
仕様変更に伴い、従来AED本体の標準付属品とさせていただいておりました
バッテリーがオプション扱いとなります。バッテリーと電極パッドは、
お客様のご都合に合わせて、別途ご注文くださいますようお願い申し上げます。



NEW!

成人・小児共通
「使い捨て除細動パッド
P-530」が登場!



※AED-2100: オレンジタイプ・ラベンダータイプ共通

NEW!

バッテリーが2種類に!
お客様のご都合に
合わせて選択可能!



※AED-2100: ラベンダータイプのみ

変更

筐体のサイズが、幅+15mm 奥行+5mm大きくなります
各種収納ケースには、従来通り収納いただけます



オレンジタイプ
質量: 2.5kg (バッテリーX212・パッド含)



ラベンダータイプ
質量: 2.55kg (バッテリーX216・パッド含) / 2.7kg (バッテリーX217・パッド含)

+5mm

+15mm



《 AED-2100の新旧の見分け方 》

①製造番号

旧: オレンジタイプ

新: ラベンダータイプ

⇒ 「00001~35381」

⇒ 「35382以降」

②ステータスインジケータの周囲の色



旧: オレンジタイプ



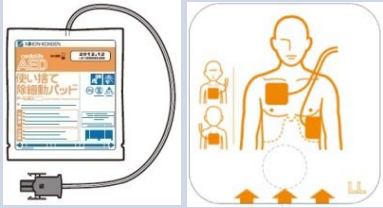

新: ラベンダータイプ

販売名: 自動体外式除細動器 AED-2100 カルジオライフ
クラス分類: 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器 医療機器承認番号: 22100BZX00362000
※AEDに不測の事態が発生した時、譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限定)、廃棄時には、
日本光電またはAEDを購入された販売店にお問合せください。
※添付文書を必ずお読みください。



NIHON KOHDEN



電極パッド	使い捨て除細動パッド P-530 [H324]	使い捨て除細動パッド P-531 [H324B]	小児用使い捨て除細動パッド P-532 [H324D]
外観/パッド表面図			
使用期限	製造から32ヶ月 出荷から約26ヶ月	製造から32ヶ月 出荷から約26ヶ月	製造から32ヶ月 出荷から約26ヶ月
寸法(パッド部)	W109×H115mm	W109×H115mm	W100×H105mm
有効ゲル面積	86.68cm ²	86.68cm ²	58.5cm ²
ケーブル長	1,500mm	1,500mm	1,500mm
クラス分類	一般医療機器	一般医療機器	一般医療機器
医療用具届出番号	13B1X00206000277	13B1X00206000282	13B1X00206000283
JANコード	4931921886540	4931921887677	4931921887691
適用機種	AED-2100, TEC-22/23/2500 TEC-55/75/76/7700	AED-2100, TEC-22/23/2500 TEC-55/75/76/7700	AED-2100, TEC-22/23/2500 TEC-55/75/76/7700
成人/小児	成人・小児の両方への使用が 想定される場合	主に成人への使用が 想定される場合	1歳以上8歳未満の小児への使用 に限られる場合

・電極パッドは、AED-2100:オレンジ、AED-2100:ラベンダーともに共通です。

・電極パッドは使い捨てです。再使用できません。 ・1歳以上8歳未満にはP-530またはP-532を使用してください。

・P-530またはP-532がないなど止むを得ない場合には、2枚のパッドが触れ合うことがないように注意して、P-531を代用してください。 ・1歳未満の乳児には使用しないでください。

バッテリーパック	バッテリーパック NKPB-1430 [X212]	バッテリーパック NKPB-14301 [X216]	バッテリーパック NKPB-28271 [X217]
外観			
待機寿命	約2年	約2年	約4年
使用開始期限	電池製造日より4年	電池製造日より4年	電池製造日より2年
廃棄期限	電池製造日より6年	電池製造日より6年	電池製造日より6年
ショック回数・モニタ時間 (新品・20℃)	70回相当・2時間以上	70回相当・2時間以上	140回相当・4時間以上
クラス分類	—	—	—
JANコード	4931921886977	4931921890189	4931921890202
適用機種	AED-2100:オレンジ 	AED-2100:ラベンダー 	AED-2100:ラベンダー 

・X212は、AED-2100:ラベンダーには装着できません。 ・X216とX217は、AED-2100:オレンジには装着できません。

- ・待機とは、装置にバッテリーと電極パッドを接続し、フタを閉じている状態をいいます。
- ・セルフテストの自動送信機能を有効とした場合は待機寿命を下回る場合があります。
- ・バッテリーの待機寿命は、設置環境や使用状況により短くなることがあります。
- ・それぞれの寿命を保証するものではありません。

AED日常点検タグをよく見える所に!

忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

